


Intraorale Kameras

XZ-2000

XZ-3000

6-LEDs

**Besuchen Sie unseren Stand (S.5) in der Industrie-
Ausstellung auf dem DVG-Kongress in Berlin am
Freitag & Samstag den 30.-31.10.2026**

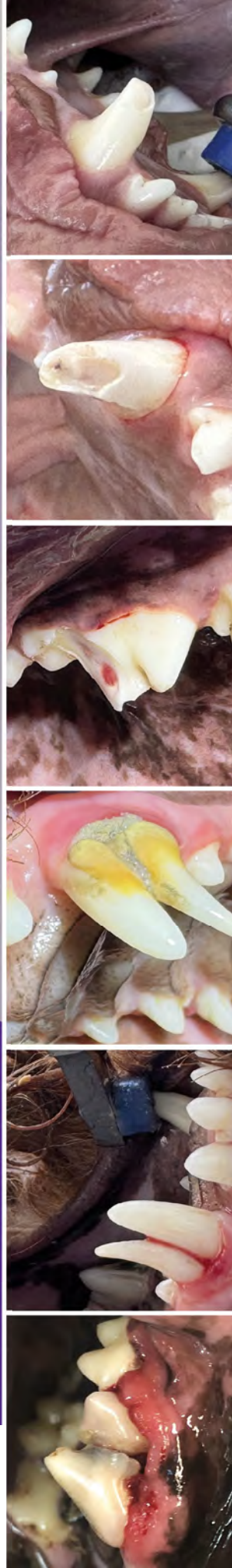

Das Komplettsystem für die Beratung und Kommunikation mit dem Tierbesitzenden

Die neue Generation wurde für einen reibungslosen Praxisalltag entwickelt. Sie vereint einfache Handhabung, maximale Flexibilität sowie eine unkomplizierte Reinigung und Aufbereitung.

1. Digitales Arbeiten

Mobil und überall einsetzbar.

2. Erklären und Entscheiden

Befunde werden für Tierbesitzende direkt sichtbar und dadurch leichter verständlich – für eine gemeinsame und fundierte Entscheidungsfindung.

3. Dokumentation

Direkte Speicherung der Aufnahmen am PC.

4. Flexibilität

Kein Lichtturm und keine externe Lichtquelle erforderlich.

5. Platzsparend

Ohne zusätzlichen Platzbedarf, direkt am PC

6. Robustheit und Langlebigkeit

Gefertigt aus Titan und Aluminium – widerstandsfähig gegen Bisschäden und für den täglichen Einsatz entwickelt.


7. Kompatibilität

Die Software ist mit den Sensoren 1,2,4 und 6 von Oriyena kompatibel.



Sehen statt erklären. Verstehen. Entscheiden.

Die intraoralen Kameras XZ-2000 und XZ-3000 von Oriyena machen Beratung, Kundengewinnung und Diagnostik einfacher, verständlicher und effizienter. Es unterstützt Behandelnde dabei, Befunde anschaulich zu vermitteln, schafft Transparenz für Tierbesitzende und erleichtert eine klare, fundierte Entscheidung – für eine zügige und zielgerichtete Behandlung.

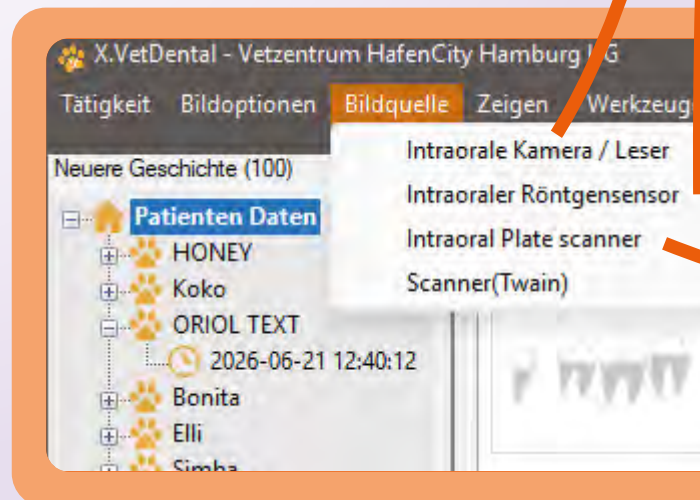

Intraorale digitale Diagnostik für alle

eine Software für Sensoren und Kamera

VDR SENSOR 1/2




+



Sensor 1 (Katz)
20 × 25 mm

Sensor 2 (Hunde)
35 × 26 mm

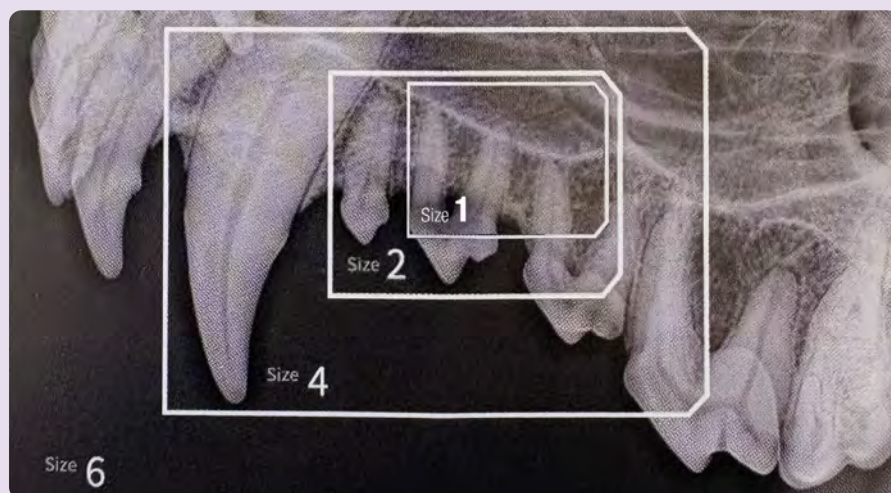

VDR SENSOR 4



Sensor 4 (große Hunde)
46,7 × 67,3 mm





EXPERTISE SEIT 2011

**Komplettlösungen & Dentaleinheiten
für alle Kolleg*innen**



EIN NEUES ZEITALTER DER TIERZAHNHEILKUNDE

IVDU, Fortschrittlichste Technologien für die Tierzahnheilkunde

Um die Integral Veterinary Dental Units weiter an Bedürfnisse anzupassen und zu verbessern haben wir über Jahre Rückmeldungen unserer Kunden gesammelt.

Dank dieser Erfahrungsberichte war es uns möglich, die IVDUs Maliena® und Orienne® weiterzuentwickeln. In ihrem Konzept vereinen sie Elemente der Humanmedizin wie die Beratung direkt am Patienten, intraorale Diagnostik und Überwachung von Bronchoaspiration und weiterer Parameter zur Überwachung der Narkose. Die Fusion dieser Elemente ermöglicht eine neue Dynamik der Tierzahnheilkunde auf hohem Niveau.

Beide Integral Veterinary Dental Units sind ein Vorsprung exzellenter Technologie, die dem Patienten eine komfortable Umgebung und Ihnen als Tierzahnärztin/-arzt ein chirurgisch sicheres und vielseitiges Arbeitsumfeld bietet, in dem Sie Diagnostik, Beratung und Behandlung durchführen können.

INTEGRAL VETERINARY DENTAL UNIT

Orianne II

ORIYENA dental



Komplettlösung für Tierzahnheilkunde in Kliniken und Praxen

Tierzahnärztlicher Behandlungstisch MALIENA bzw. ORIANNE Generation II

Tierzahnarztelement mit 10 Instrumentenpositionen / Systeme

1. Zahnsteinentfernungsgerät „Woodpecker“ mit Piezo und LED-Licht
2. erste luftbetriebene High-Speed-Turbine mit 6-Loch-Anschluss (LED kompatibel)
3. zweite luftbetriebene High-Speed-Turbine mit 6-Loch-Anschluss (LED kompatibel)
4. elektrischer Mikromotor ORIYENA Eppendorf HH400 EM:4U2 Plus
5. eingebaute Polymerisationslampe (Aushärtungslicht) mit zwei Stufen
6. 3-Wege-Spritze (Wasser, Luft und Gemisch aus Wasser und Luft)
7. Absaugungssystem für Hunde
8. Absaugungssystem für Katzen
9. Mikromotor-Bedienung per Touch-Pad
10. Zusatztray für Normtrays



Scaler mit LED-Licht



Woodpecker Scaler Aufsätze



Polymerisationslicht

Behandlungstisch mit 9 Funktionen:

1. elektrisch höhenverstellbar von 75 cm bis zu 105 cm
2. zuverlässig, standfest und wartungsfrei
3. Hubsystem bis 185 kg
4. elektrische Kippfunktion bis zu 15 Grad, um Wasseraspiration zu verhindern
5. Edelstahlrost mit integrierter Zahnsteinwanne und Abfluss
6. pneumatischer Fußschalter mit sechs Funktionen
7. Steckdosenleiste mit fünf Steckdosen und Notfall-Schalter
8. Infusionsständer für Infusion und Infusomat
9. Schalter für Wasser und Gemisch aus Wasser mit Hexarinse



Patientenkommunikation und Beratung:

OSAVision Full HD 22 Zoll Monitor mit Intraoral-Kamera: Zeigen Sie dem Tierbesitzer, wo der Schmerz lokalisiert ist. Ein Novum für Tier Zahnärzt*innen, wodurch Ihre fachliche Beratung für die Tierbesitzenden noch verständlicher wird!

Diagnostik-Röntgen:

intraorales Röntgen-System von Toshiba oder Hitachi

optional: CMOS Sensorsystem für digitale Röntgenaufnahmen in Größe 1 für Katzen: (36,8 mm x 25,4 mm) ODER/UND Größe 2 für Hunde (44,3 mm x 32,3 mm)



Röntgen-System (inklusive)

Tierzahnarztassistent*innen-Element

1. Schwebendes Tierzahnarztassistent*innen-Element mit hängenden Instrumentenschläuchen (Orianne II) oder Peitschen-Instrumentenschläuchen (Maliene II)
2. Große Absauge-Vorrichtung für Hunde
3. Kleine Absauge-Vorrichtung für Katze
4. 3-Wege-Spritze
5. zusätzliche Steuerung für den Behandlungstisch
6. Behandlungsleuchte/OP-Leuchte mit Kontroll-Paneel



Highspeed Turbine

Behandlungsleuchte/OP- LED Leuchte

Wahl zwischen zwei LED-Behandlungslampen: kleine Lampe mit 6 LEDs und 20.000-42.100 Lux oder große Lampe mit 28 LEDs und 140.000 Lux, beide mit Infrarot-Sensor für gelbes Licht



1:1 LED Handstück

Gratis Turbinen-Starterset:

- Handstück blau mit 1:1 LED-Licht
- Winkelstück rot 1:5 mit LED-Licht
- Winkelstück blau 1:1 mit LED-Licht
- Highspeed-Turbine mit LED-Licht



1:1 LED Winkelstück

Zusatzinformationen:

Die neue integrale Tierzahnheilkunde-Behandlungseinheit ist kompatibel mit NSK-Equipment und wird inklusive eines gratis Turbinen-Startersets ausgeliefert.

Gratis
Ausstattung für alle
Dentaleinheiten*



Mikromotor-Bedienung




Mikromotor



1:5 LED Winkelstück



**Tierzahnheilkunde für
alle Kolleg*innen**

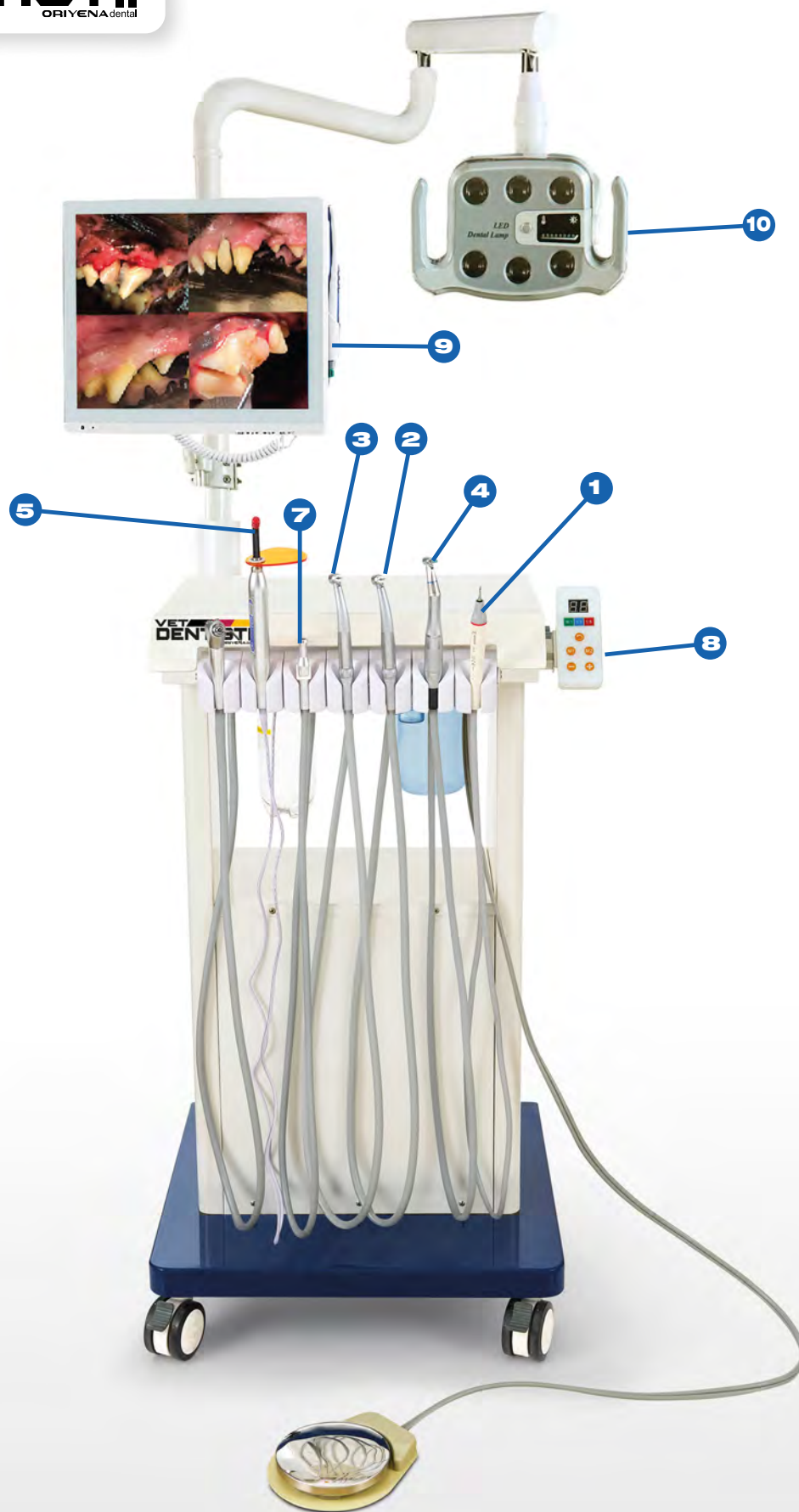



Tierzahnheilkunde für alle Kolleg*innen

Neu konzipiert, modern und leistungsfähig.

Der neue VetDentist Professional II bietet alles, was Sie brauchen, vom Scaler bis zum Mikromotor. Sogar eine Einheit mit 6-LED-OP-Beleuchtung ist enthalten.

VETDENTIST II + 6 LED OP Lampe & Beratungsmonitor

Mit 8 Instrumentenpositionen

- 1 Zahnsteinentfernungsgerät „Woodpecker“ mit Piezo und LED-Licht
- 2 erste luftbetriebene High-Speed-Turbine mit 6-Loch-Anschluss (LED kompatibel)
- 3 zweite luftbetriebene High-Speed-Turbine mit 6-Loch-Anschluss (LED Kompatibel)
- 4 elektrischer Mikromotor ORIYENA Eppendorf HH400 EM:4U2 Plus
- 5 eingebaute Polymerisationslampe (Aushärtungslicht) mit zwei Stufen
- 6 3-Wege-Spritze (Wasser, Luft und Gemischt aus Wasser und Luft)
- 7 Absaugungssystem für Katzen und Hunde
- 8 Mikromotor-Bedienung per Touch-Pad

9 Patientenkommunikation und Beratung:

OSAVision Full HD 22 Zoll Monitor mit Intraoral-Kamera: Zeigen Sie dem Tierbesitzer, wo der Schmerz lokalisiert ist.

Ein Novum für Tierzahnärzte, wodurch Ihre fachliche Beratung für die Tierbesitzer noch verständlicher wird!

10 Integrierte Behandlungsleuchte/6 LED OP-Leuchte

mit 6 LEDs und 20.000-42.100 Lux

mit Infrarot-Sensor für gelbes Licht

Zusatzinformationen:

Die neue Behandlungseinheit ist kompatibel mit NSK-Equipment und wird inklusive eines gratis Turbinen-Startersets ausgeliefert.

Gratis Turbinen-Starterset:

Winkelstück rot 1:5 mit LED-Licht

Winkelstück blau 1:1 mit LED-Licht

Highspeed Turbine mit LED-Licht

Handstück blau mit 1:1 LED-Licht

inkl. 5 Jahre Garantie



Mikromotor



Scaler mit LED-Licht



Woodpecker Scaler Aufsätze



Highspeed Turbine



1:1 LED Winkelstück



1:5 LED Winkelstück



1:1 LED Handstück



Fußpedal



Highspeed Turbine




Polymerisationslicht

Gratis
Ausstattung für alle
Dentaleinheiten*

NOVUM

Spezielle Highspeed Turbine & Winkelstücke für Katzen & Hunde

Alle Turbinen werden mit einem **kostenlosen Ersatzrotor inklusive Kugellagern** geliefert – für eine längere Lebensdauer über den Garantiezeitraum hinaus.

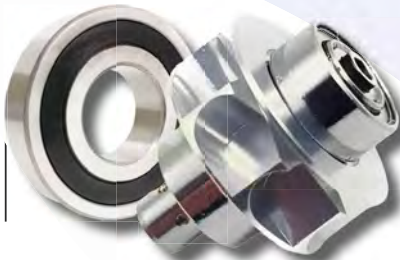

Kopfumfang: $\varnothing 10,8 \times 13,00$ mm



**HIGHSPEED TURBINE
DOG M**

High-Speed Dental Luftturbine für Hunde / Dogs M

Standard head, Push button, Fiber optic, 3 hole Spray, Anti-Retraktion

Head size: $\varnothing 10,8 \times \varnothing 13,00$ mm, Speed 380 000 - 380 000 rpm, Noise ≤ 70 dB

Kopfumfang: $\varnothing 9,0 \times 10,60$ mm



**HIGHSPEED TURBINE
FORL/CATS**

High-Speed Dental Luftturbine für FORL/KATZEN/CATS

Mini head, Push button, Fiber optic, 3 hole Spray

Head size: $\varnothing 9,0 \times \varnothing 10,60$ mm, Speed 380 000 - 450 000 rpm, Noise ≤ 70 dB

NSK-Kupplung



Alle Turbine & Winkelstücke sind an unserem Messestand erhältlich und bestellbar



Konventionelle Kupplung

Besuchen Sie unseren Stand (S.5) in der Industrie-Ausstellung auf dem DVG-Kongress in Berlin am Freitag & Samstag den 30.-31.10.2026



Kopfumfang: $\varnothing 12,5 \times 13,00$ mm



**Oriyena Winkelstück
1:1 Blau mit LED**



**Oriyena Handstück
1:1 mit LED**



**HIGHSPEED TURBINE
DOG L**

High-Speed Dental Luftturbine für Hunde / Dogs L
Big head, Push button, Fiber optic, 3 hole Spray, Anti-Retraktion
Head size: $\varnothing 12,5 \times \varnothing 13,00$ mm, Speed 300 000 - 380 000 rpm, Noise ≤ 70 dB



**Oriyena ENDO-Winkelstück
4:1 Untersetzung**



**Oriyena Winkelstück
1:5 Rot mit LED**

Unser Service-Versprechen

Das Leistungs- und Qualitätsversprechen der Oriyena Dental Hamburg GmbH setzt neue Maßstäbe in der Branche

Unser Ziel ist es, Ihren Praxisbetrieb lückenlos abzusichern. Wir sorgen dafür, dass Sie sich im Arbeitsalltag weder um plötzliche Systemausfälle noch um unvorhersehbare Instandhaltungskosten sorgen müssen.

All-Inclusive-Inbetriebnahme und Praxistraining

Ein optimaler Start ist entscheidend für die Effizienz Ihrer Praxis. Daher transportieren wir Ihre Neugeräte nicht nur sicher an den Bestimmungsort, sondern übernehmen auch die komplette Fachmontage sowie die technische Erstkonfiguration vor Ort – dieser Service ist für Sie vollkommen kostenfrei. Die fachgerechte Entsorgung der Transportverpackungen erledigen wir auf Wunsch direkt im Anschluss. Um einen absolut sicheren Umgang im täglichen Einsatz zu garantieren, weisen wir Sie und Ihr gesamtes Team umfassend und praxisnah in die Bedienung ein. Das sorgt für einen reibungslosen, stressfreien Übergang in den laufenden Betrieb.

Erweiterter Investitionsschutz und Pflege-Expertise

Für langfristige finanzielle Planbarkeit weit über die gesetzlichen Vorgaben oder Standardgarantien hinaus sorgt unser zubuchbarer Premium-Schutz von bis zu fünf Jahren. Sollte eine Komponente ausgetauscht werden müssen, stellen wir ein Ersatzgerät bereit, um teure Leerlaufzeiten in Ihrer Praxis zu verhindern. Damit Ihre medizintechnischen Systeme dauerhaft den Wert erhalten, unterstützen wir Sie zudem mit herstellerunabhängigen Empfehlungen zu den effektivsten Pflege- und Reinigungsprodukten, die der Markt bietet.

Zuverlässige Nachbetreuung und Soforthilfe

Unser Engagement endet nicht mit der Installation. Wir begleiten Ihre Praxis dauerhaft durch einen reaktionsschnellen Kundenservice, kontinuierliche Softwareupdates und präventive Inspektionen, die die Langlebigkeit Ihrer Anlagen sichern. Durch unsere hauseigene Fachwerkstatt und ein umfassend bestücktes Ersatzteillager können wir notwendige Reparaturen ohne zeitaufwendige Umwege direkt durchführen.